

Портативный ирригатор Рокимед Модель №: RKM-1701


Обратите внимание

- Продукт **не** является игрушкой!
- Детям младше 14 лет следует использовать ирригатор под наблюдением взрослых.
- Ирригатор предназначен для удаления остатков пищи из межзубных промежутков, брекетов, несъемных мостов и труднодоступных мест ротовой полости.
- Ирригатор не является заменой обычной зубной щетки при гигиене полости рта!
- Продукт не требует профессиональной подготовки для использования.
- Используйте продукт только в соответствии с инструкцией. Любое другое использование считается некорректным.
- Дефекты, возникающие из-за неправильного обращения или повреждения, исключены из гарантии. Это положение также относится к естественному износу.

Техника безопасности

- **ВНИМАНИЕ!** Держите упаковочный материал вдали от детей и животных. Есть опасность травм и нанесения вреда!
- Ирригатор не подходит для людей, имеющих тяжелые формы пародонтита, раны и язвы слизистой оболочки полости рта. Посетите, пожалуйста, врача, не занимайтесь самолечением, есть опасность инфицирования вследствие попадания бактерий с потоком воды в открытые раны и язвы.
- Держите прибор вдали от источников тепла, таких как плиты, печи, камины или горящие свечи.
- Не допускайте падения изделия и не подвергайте его сильным ударам.

Комплектация ирригатора

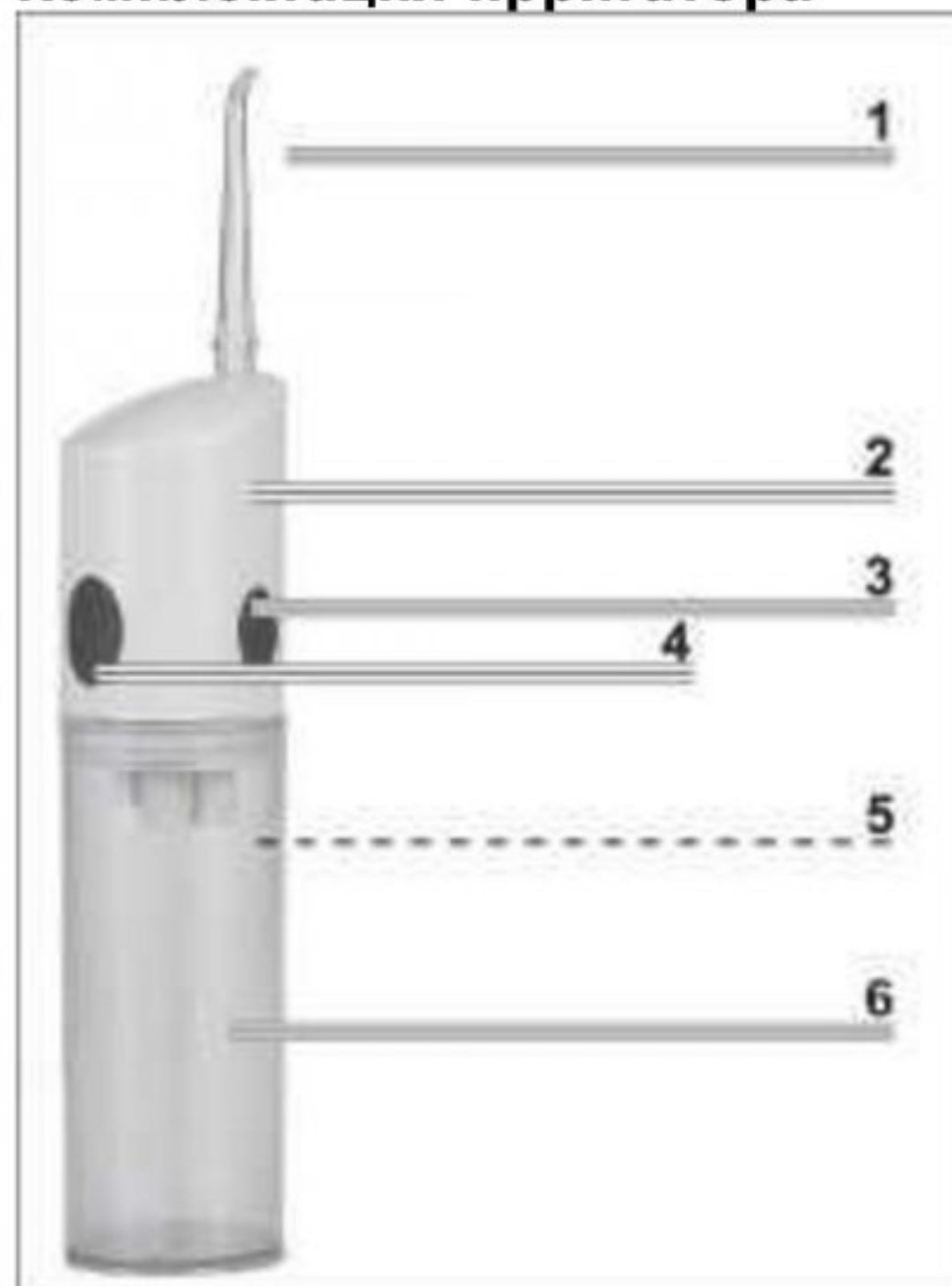

- 1 Насадка
- 2 Корпус насоса
- 3 USB-порт для зарядки
- 4 Кнопка «Вкл./Выкл.»
- 5 Всасывающий шланг
- 6 Резервуар для воды

Советы

- Из соображений гигиены мы рекомендуем использование ирригатора только одним человеком.
- Во время использования Ваш открытый рот должен располагаться непосредственно над раковиной, в целях незамедлительного удаления воды с остатками пищи.
- Вы можете использовать ирригатор вместе с ополаскивателем для полости рта. Убедитесь, что он имеет такую же вязкость, как вода – иначе ополаскиватель не сможет поступать через насос. Не используйте таблетки, которые растворяются в резервуаре, гели и кремы!
- Мы рекомендуем снять насадку и поместить ее в резервуар для воды, если Вы хотите взять изделие в поездку. Это позволит предотвратить от повреждений насадку.

Подготовка к использованию

1. Почистите зубы зубной щеткой (обычной или звуковой электрической), при необходимости используйте зубную нить.
2. Откройте резервуар ирригатора для воды: для этого поверните его против часовой стрелки.
3. Достаньте насадку и установите ее в верхней части ирригатора.
4. Заполните резервуар теплой водой или ополаскивателем для полости рта.
5. Закройте резервуар, повернув его по часовой стрелке до упора.

Использование

1. Держа ирригатор в вертикальном положении, поместите насадку непосредственно в пространство между двумя зубами, под брекеты или несъемный мост.
2. Для включения устройства и вывода его из «Режим Сна»: нажмите и удерживайте три секунды кнопку «Вкл./Выкл.».
3. Медленно и тщательно обрабатывайте зубы один за другим. Повторите процесс очистки с внутренней стороны зубов.
4. Для выключения ирригатора нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» один раз.
5. Для перевода устройства в «Режим Сна» нажмите и удерживайте три секунды кнопку «Вкл./Выкл.». «Режим Сна» нужен, чтобы ирригатор случайно не включился, когда Вы перевозите его в сумке.

Уход и хранение

ВНИМАНИЕ!

При чистке не используйте агрессивные, абразивные или токсичные чистящие средства!

- Снимите резервуар для воды и вылейте всю воду.
- Включите ирригатор на несколько секунд для удаления остатков воды из всасывающего шланга и насадки.
- Если Вы использовали ирригатор с ополаскивателем, промойте его теплой водой.
- Перед сборкой дайте изделию полностью высохнуть, затем соберите его.
- Храните ирригатор в сухом месте, недоступном для детей и животных. Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.

Характеристики

Модель: RKM-1701
 Объем резервуара: 150 мл
 Давление воды: 60-80 psi
 Литиевая батарея: 560 mAh
 Порт для зарядки: через USB-кабель
 Материал: PC+ABS
 Автовыключение: 30 секунд

Утилизация



Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизируйте упаковку безвредным для окружающей среды способом, сделайте ее доступной для службы сбора материалов, подлежащих переработке. Утилизируйте изделие экологически безопасным способом. Для получения дополнительной информации свяжитесь, пожалуйста, с администрацией в Вашей стране.